


KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST


Produkt: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
 Hersteller: Roche

Vorbereitung

Diese Komponenten sollten zur Testdurchführung vorliegen:

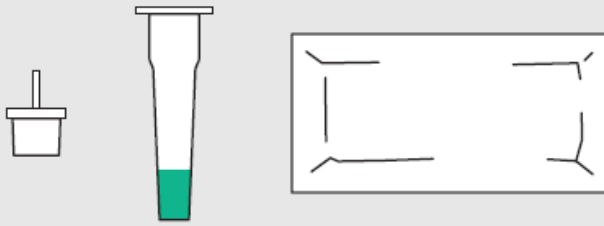


Zur Probennahme den separat erhältlichen Abstrichtupfer (Marke: Nasal Swabs, Mat.-Nr. 09 421 777 001) verwenden



Probennahme (bei Zimmertemperatur)

Kopf leicht nach hinten neigen, Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher langsam ca. 2 cm parallel zum Gaumen einführen, dabei keinen Druck ausüben. Jeweils viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen (ca. 15 Sekunden)

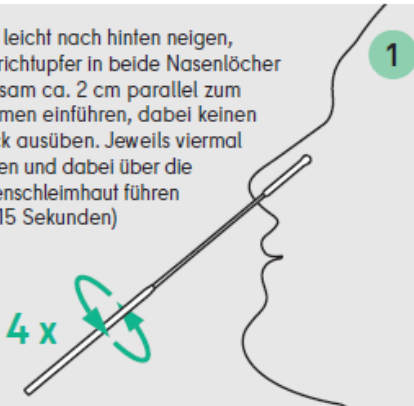

1

4 x

Behandlung der Probe

2 Abstrichtupfer einführen und mehr als zehnmal drehen

mehr als 10 x

Röhrchen dabei gegen Tupfer zusammendrücken, um Antigene zu lösen


3 Tupfer unter festem Druck auf die Röhrchenwand entnehmen und Tropfkappe aufsetzen

4 Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

4 x


5 Ergebnis nach 15 min ablesen

Nach mehr als 30 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

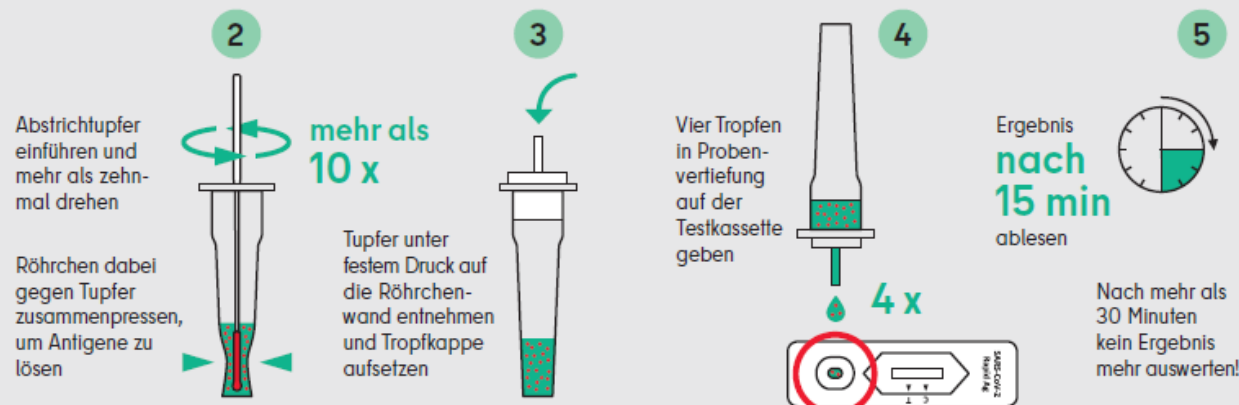

Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

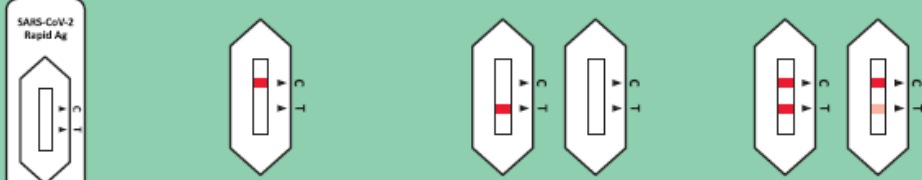

Negativ
Farbige Kontrolllinie (C)

Ungültig/unklar
Keine Kontrolllinie (C)

Positiv
Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

Entsorgung



Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen

Anleitungen auch auf unserer Homepage und auf IServ